




## IPL Photon Rejuvenation and Hair Removal Apparatus

### Termékbemutató

Az instrument a foton beauty IPL technológiát alkalmazza, amely közvetlenül a bőrt sugározza be erős impulzusfényvel, hogy fotobiokémiai hatást fejtsen ki. Egyrészt regenerálhatja a bőrben lévő kollagénrostok és elasztikus rostok regenerálódását, helyreállíthatja a bőr rugalmasságát, és javíthatja a vér mikrocirkulációját, eltávolíthatja vagy csökkentheti a ráncokat; másrészt az Erős impulzusú fény behatolhat a bőrbe és pigmentálódhat a szövetekben. A hajszálerek előnyösen felszívódnak. A hőenergia megalvasztja a vért anélkül, hogy elpusztítaná a normál bőrszöveteket, és a pigmentklaszterek hővel lebomlanak, ezáltal enyhítve a hajszálerek túlzását, eltávolítva a foltokat és eltávolítva a felesleges szőrzetet.

### A termék áttekintése:

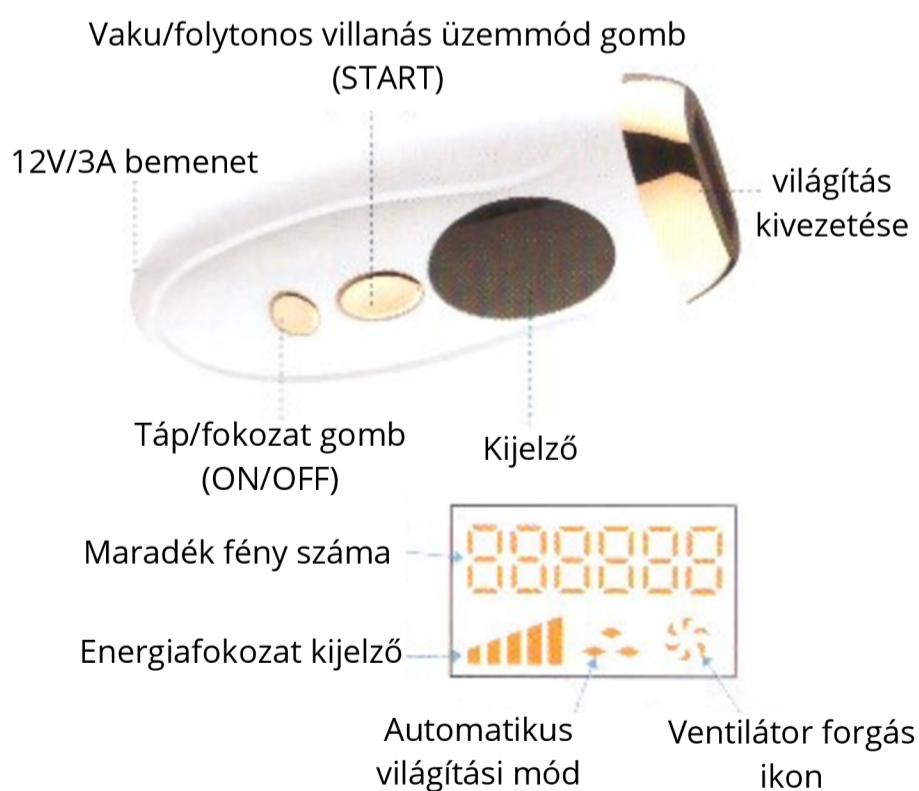

### Bőrvizsgálat

Az első használat vagy barnítás előtt kérjük, végezzen bőrpróbát minden egyes kezelési helyen. A bőrpróba szükséges lépés. Célja, hogy ellenőrizze a bőr reakcióját a kezelésre, és eldöntse, hogy az adott helyen megfelelő fényintenzitást használjon.

- 1.Válassza ki a kezelési forráshoz közeli területet
- 2.Kapcsolja be a készüléket.
- 3.Helyezze az eszközt a bőrhöz, majd nyomja meg a Flash gombot a villanás kiváltásához.
- 4.Miután befejezte a bőrpróbát, kérjük, várjon 24 órát, mielőtt kiválaszt egy olyan felszerelést, amely nem okoz bőrreakciót, és használja azt a következő szőrtelenítő kezeléshez.

### Bőrtónusra alkalmas:

Alkalmazási terület: Ajakszőrzet, hónaljszőrzet, végtagszőrzet, előhajsza és egyéb, az esztétikát befolyásoló szőrzet; a konkrét kontrasztkártyát lásd az alábbiakban:

### Bőrtónusú haj kontrasztkártya

| Bőrszín       | Fehér | Bézs | Világos barna | Barna | Sötét barna | Fekete |
|---------------|-------|------|---------------|-------|-------------|--------|
| hajsza        |       |      |               |       |             |        |
| Fehér/szürke  | ✗     | ✗    | ✗             | ✗     | ✗           | ✗      |
| vörös         | ✗     | ✗    | ✗             | ✗     | ✗           | ✗      |
| Világos szőke | ✗     | ✗    | ✗             | ✗     | ✗           | ✗      |
| Sötét szőke   | ✓     | ✓    | ✓             | ✓     | ✗           | ✗      |
| barna         | ✓     | ✓    | ✓             | ✓     | ✗           | ✗      |
| Sötét barna   | ✓     | ✓    | ✓             | ✓     | ✗           | ✗      |
| Fekete        | ✓     | ✓    | ✓             | ✓     | ✗           | ✗      |

## Óvintézkedések:

1. Gyengült bőrérzékelésű személyek nem használhatják
2. Allergiás dermatitis, ekcéma és egyéb bőrbetegségek, allergiás betegek nem használhatják
3. Terhes nők és nők, akik menstruálnak vagy szoptató nők nem használhatják
4. Azok, akik az elmúlt 2 hétben napozásnak voltak kitéve, nem használhatják.

## Használati utasítás:

Használat előtti előkészítés:

1. Kérjük, először távolítsa el a szőrzetet a bőr felszínén, és végezze el a bőr előkezelését, de borotválkozás előtt meg kell nedvesíteni a szőrzetet (szappan vagy tusfürdő buborékokat használjon a szőrzet nedvesítéséhez és a legjobb hatású borotválkozáshoz), különben a "száraz borotválkozás" könnyű tp borotválkozás

A bőrfelületen lévő hámréteg rossz allergiát okoz!

. Tisztítsa meg a bőrt, és győződjön meg róla, hogy nincs nyilvánvaló szőr a Felületen, teljesen száraz, és nincs olajos anyag. A Photon szőrtelenítő készülék használata előtt szigorúan tilos olyan termékeket alkalmazni, mint a kondenzátum és az aloe géll, Ellenkező esetben nem okoz fényt.

## A termék paraméterei:

A termék neve: IPL foton fiatalító és szőrtelenítő készülék

Műszer elve: IPL foton szépségtechnológia

Modell: TMY-002

Kiváló szabvány: GB 4706.1-2005

GB 4706.15-2008

Bemeneti feszültség: DC12V

Jelenlegi 3A

Teljesítmény: 36W

Nettó súly: 220G

Hullámhossz: 570N-1100NM



Megjegyzés: A termékek folyamatos frissítése miatt a vállalat fenntartja a jogot a termékek módosítására, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

## Használati lépések:

1. Használat előtt tisztítsa meg a készülék fénykivezetését és szűrőjét pamutszivaccsal vagy orvosi alkoholba mártott tiszta ruhával (ha nem piszkos, akkor nem tisztíthatja meg), ügyeljen arra, hogy a fénykivezetést használat előtt száraz legyen, különben befolyásolja a fényt.
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, nyomja meg és aranyozza be a bekapcsológombot 3 másodpercig a bekapcsolásához. 3. A bekapcsológomb egyben fogaskerékkel is. Kattintson a „sebességváltó gombra” a megfelelő sebességváltó kiválasztásához a kijelző mutatja az energia sebességváltót, az 1. sebességváltó a legkisebb, az 5. sebességváltó a legnagyobb a sebességváltó ciklikusan állítható:
4. Miután a fogaskerék s afbeállítva, a készülék fénykibocsátása teljesen csatlakozik a szőrtelenítendő bőrfelülethez. Ekkor, amikor a kijelző villog, nyomja meg enyhén a fénygombot a fénykibocsátáshoz;
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fénygombot 3 másodpercig az automatikus fénykibocsátó üzemmódba való belépéshez vagy kilépéshez.

A kijelzőn lévő 3 prizma világit, jelezve, hogy az automatikus fénykibocsátó üzemmód be van kapcsolva: a ciklus ötödik steo-jában minden egyes bőrrész, amely közel van a szőrtelenítés helyéhez, onve villog és lassan mozog.

A szőrtelenítési területet minden alkalommal háromszor polírozza, de ahelyett, hogy háromszor egymás után ugyanazon a helyen políroznák, az egész szőrtelenítési területet egyszer kell eltávolítani, majd kétszer megismételni, (Mivel ugyanazt a helyet folyamatosan háromszor égetik, forró lesz és könnyen megéghet)

6. A szőrtelenítő készülék használata után alkalmazzon aloe vera gélt (opcionális). A készülék használata után nyomja meg és hol a „bekapcsoló gombot” 3 másodpercig a kikapcsoláshoz, és időben kapcsolja ki az áramot. A lámpafej szűrő használata után kis fekete foltok lehetnek a tartozékon. Törölje le alkohollal.

## kezelési ciklus referenciatáblázat

|                 |                                    |  |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 1-4 hét         | Használja 2-3 alkalommal egy héten | A haj több mint a 75%-a természetes úton kihullik  |
| 5-6 hét         | 2 alkalommal egy héten             | új hullás és gátolja a növekedést  |
| 7-8 hét         | egyszeri alkalom egy héten         | a haj vékonyabbá és kevésbé, már nem lepattanóvá válik   |
| Több mint 8 hét | 1-2 alkalommal a héten             | a hajnövekedés állapotának megfelelően szelektíven használható (amikor a haj nő, újra használható, amíg már nem nő). |

A szőrtelenítő kezelés háromszoros besugárzásból áll ugyanazon a helyen. Minél magasabb a fokozat, annál nagyobb az energia és annál jobb a hatás. A korai szakaszban 1-2 fokozat használata ajánlott. A bőr alkalmazkodása után a későbbi szakaszban 3-5 fokozatot is választhat. A kezeléseket közötti időköz az Ön személyes hajnövekedési ütemétől függ. A különböző testrészek helyzete is eltérő lesz.

## Használja teljes körűen:

1. a bőrön enyhe bőrpír vagy bizsergés vagy melegség jelentkezhethet. Ezek a reakciók teljesen ártalmatlanok és hamarosan megszűnnek.
2. A műszer 2 órás használata után a kezeléshez krémet, krémet, dezodort, hidratáló terméket vagy kozmetikumokat alkalmazhat. Kérjük, várja meg, amíg ezek a körülmények megszűnnek. Ezután alkalmazzon bármilyen terméket a bőrre, Ha a bőr bizsergést érez a termék alkalmazása után, mossa le vízzel.

## A termék karbantartása:

1. Kérjük, használat után azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót, és hagyja lehűlni a készüléket.



2.Nedvesítsen meg egy puha ruhát egy kevés tiszta vízzel, majd tisztítsa meg vele a következő részeket: szűrő, bőrrel érintkező

3.Tárolja a készüléket száraz helyen, 0 fok és 60 fok közötti hőmérsékleten, pormentes helyen.

## Hibaelhárítás

| Probléma leírása   | Lehetséges probléma  | Megoldás  |
|--|--|---|
| a készülék/tápegység adapter túlmelegszik használat közben   | Ez normális  | Nincs szükség beavatkozásra   |
| A szőrtelenítőt a bőrhez érintkezve (villanás készenlétben) a kijelző nem világít de a hűtő ventilátor elindult. | Újra kell indítani a készüléket  | amikor a túlmelegedés elleni védelmi üzemmód bekapcsol és a ventilátor továbbra is forog, ne kapcsolja le a készüléket. Hagyja 15 percig lehűlni mielőtt újra használatba venné.                      |
| Szag a készülék használatakor  | A tartozékok vagy szűrők túl koszosak  | Kérjük gondosan tisztítsa meg a tartozékokat  |
|  | Nem távolította el megfelelően a szőrt a kezelni kívánt részen. Ezek a szőrszálak használatkor eléghetnek és szagot árasztanak | Kérjük távolítsa el a bőr felületén a szőrszálakat mielőtt használatba venné  |
| A kezelés során sokkal érzékenyebb a bőre mint általában, és elviselhetetlen fájdalmat érez használata során     | Túl magas a fényerősség  | Kérjük bizonyosodjon meg hogy a bőréhez megfelelő erősségi fokozatot használja, ha szükséges vegye lejjebb a fokozatot  |
|  | Nem távolította el megfelelően a szőrt a kezelni kívánt részen.  | Kérjük távolítsa el a bőr felületén a szőrszálakat mielőtt használatba venné  |
|  | nem megfelelő területen használja a készüléket, az Ön bőrszíne nem alkalmas a termékkel való kezelésre.                        | A következő területeken ne használja a terméket: mellbimbó, areola, kisajkak, vagina, végbélnyílás, orrlyuk, és a fül belső részén. A férfi felhasználók nem használhatják, arcukon vagy herezacskón. |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Elégedetlen a kezelés eredményével | Túl alacsony a fényerősség  | Kérjük próbálja meg magasabb fokozaton  |
|                                    | Nem történt újabb villanás a már kezelt bőrfelületen.                                       | Kérjük, villantson a lehető legközelebb a korábban kezelt területhez.   |
|                                    | A készülék nincs hatással a hajszíne  | Amennyiben az Ön hajszíne világos szőke, arany vagy vörös, ezek a kezelések nem lesznek hatékonyak. Az összes szőrszál sikeres eltávolításához ajánlott követni az ajánlott kezelési folyamatot. A kezelési intervallumot lerövidítheti, de t nem haladhatja meg a napi egy kezelést. |
|                                    | Az eszköz elégtelen használata miatt az IPL-terápiára adott válaszlépések lassúak lehetnek. | Folytassa a készülék használatát legalább 6 hónapig, mert ez idő alatt a szőrszálak újránőnek, de csökkennek.   |

## Használati megjegyzések:

1. Használat közben ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és ne irányítsa azt közvetlenül a szemekre.
2. Használat után enyhe bőrpír normális, ez önmagától vagy hűtéssel enyhülhet.
3. A fénykimenet vagy az üveg tisztításakor tilos közvetlenül alkoholt permetezni rá.
4. A készülék használata során ne alkalmazzon gél állagú kozmetikumokat a bőrön, mivel ezek károsíthatják a készüléket.
5. Használat alatt kerülje a fényérzékenyítő ételek (pl. spenót, repce, mustár stb.) fogyasztását.
6. Az energiafokozatok beállítása gyenge szintről halad az erős felé. A bőr károsítása nélkül minél magasabb az energia, annál jobb az eredmény.
7. Sötétebb bőrű felhasználóknál előfordulhat lassabb reakció, ezért nem szükséges azonnal növelni az energiaszintet, mivel a hatás nem mindig azonnal látható.
8. A használat után figyeljen a bőr hidratálására és fényvédelemre.
9. Kerülje az UV-sugárzást a használat után: használjon napvédőt, viseljen kalapot, szemüveget, számítógépes szemüveget, fényvédő ruházatot stb.
10. Használat közben ne blokkolja a készülék levegő be- és kimeneti nyílásait, hogy ne akadályozza a hőleadást.
11. A fénykimeneti nyílás szélén lévő műanyag elszíneződhet vagy sötét foltok jelenhetnek meg rajta, ha haj vagy szennyeződés kerül a fényforrás elé. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét és rendeltetésszerű használatát.
12. A „világító” visszajelző lámpa a használat során kb. 10 fokkal felforrósodhat, ami a normál működés része, nem hibajelenség. Ha a hőmérséklet túllépi a megadott határértéket, a lámpa automatikusan leáll, majd újra működőképes lesz.
13. A termék nem vízálló! Ne használja fürdőszobában, zuhanyzóban vagy más olyan helyen, ahol víz éri.
14. Ha a készülék megsérül vagy vízbe esik, ne használja tovább. Küldje vissza a gyártónak ellenőrzésre.
15. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozóból. Használat előtt mindig ellenőrizze az eszközt.
16. Ne használja a készüléket erős mágneses tér, nedvesség, por vagy magas hőmérsékletű környezet közelében.
17. Tilos más célra használni a készüléket, mint amire eredetileg tervezték.