


# Intelligens víz

Flosser

## Termék kézikönyv

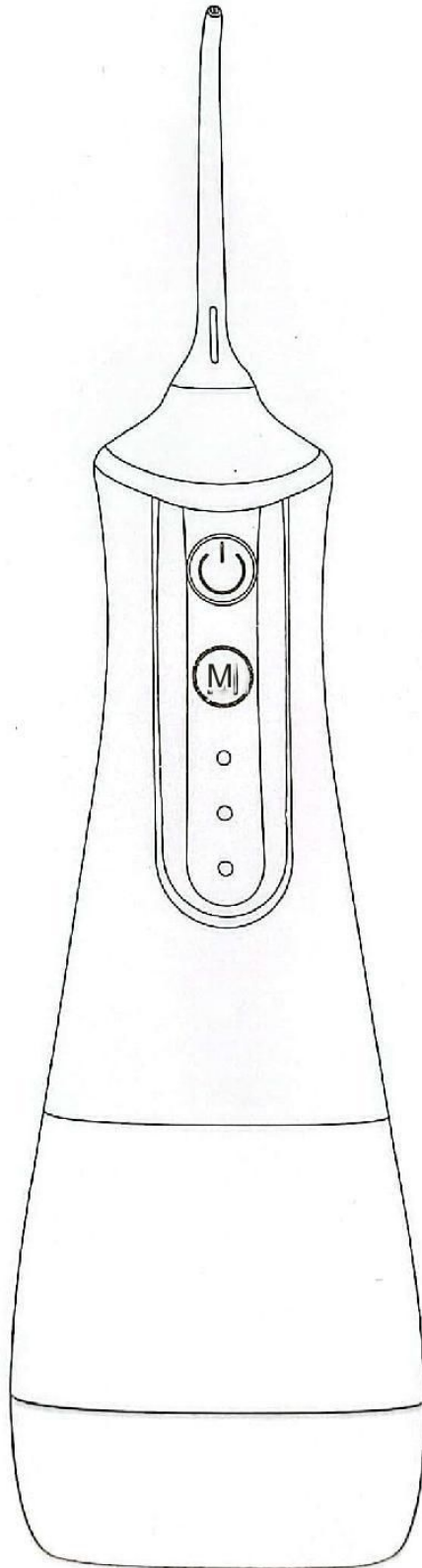

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a termék kézikönyvét, és őrizze meg későbbi használatra.

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

## Veszély

- Ha nem érti a kezelési eljárásokat és a biztonsági utasításokat, kérjük, ne használja ezt a terméket, hogy elkerülje a nem megfelelő működésből eredő sérüléseket.
- Kérjük, ne használja a terméket a jelen kézikönyvtől eltérő módon.
- Ne szerelje szét a terméket, és ne változtassa meg a termék alkatrészeit, hogy elkerülje a termék károsodását vagy a nagyfeszültségű áramütést, és a garancia érvénytelen.
- Ne használjon 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet a víztartályban, és az égési sérülések elkerülése érdekében tisztítsa meg a száját.

• Ha a fogtisztító töltés közben a vízbe esik, kérjük, húzza ki a fali adapter hálózati csatlakozóját a termék eltávolítása előtt.

Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, használat előtt cserélje ki a hálózati adaptert.

- Ne tegye tűzbe vagy hőségbe a terméket, és ne töltsen, ne használja vagy tegye magas hőmérsékletre.


## Figyelem

- Ne használja ezt a terméket szájtisztításon kívül más célra.
- Ne nyomja erősen a fúvókát az ínyre vagy a fogakra, nehogy megsérüljön íny.
- Kérjük, helyezze biztonságos helyre ezt a terméket, hogy elkerülje a vízbe esést.
- Ne merítse vízbe a terméket, hogy elkerülje a meghibásodást, vagy tüzet, áramütést, robbanást és egyéb veszélyeket.
  - Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápcsatlakozót és a töltődugót nedves kézzel.
  - A tápcsatlakozó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren jelzett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.
  - Ne sértse meg és ne módosítsa a tápkábelt, ne feszítse, hajlítsa vagy csavarja meg erővel, ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, és ne szoruljon be a tápkábelt tárgyak közé.
    - Ne helyezze a terméket, különösen a tápkábelt forró tárgyak közelébe.
    - Karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és a töltődugót.
    - Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre, és kerülje a közvetlen érintkezést napfény.
  - Ne töltsen a terméket forró vagy párás helyen, például fürdőszobában vagy WC-ben.
  - Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápkábelt és a töltődugót a tűz és a veszély elkerülése érdekében.

## Figyelem

- Ennek a terméknek nincsenek cserélhető vagy javítható alkatrészei. Ha javításra van szüksége, küldje vissza a gyártóhoz.
  - Ne használja, ha nincs fúvóka.
- Egyes szájöblítők korrodálhatják ezt a terméket, kérjük, ne használjon szájvizet ebben a termékben.
- Ez a termék nem alkalmas gyermekek, csecsemők és olyan kezelők számára, akik csak akkor használhatják, ha a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a termék használatára vonatkozóan. Kérjük, tartsa távol a gyermekektől és babáktól, ne használja játéknak.
- Parodontális betegségben szenvedő vagy szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek az elmúlt 2 hónapban használat előtt konzultáljon orvosával.
- Amikor bedugja vagy kihúzza a tápegységet, tartsa a csatlakozót a tápkábel helyett,


# Szerkezeti bevezetés

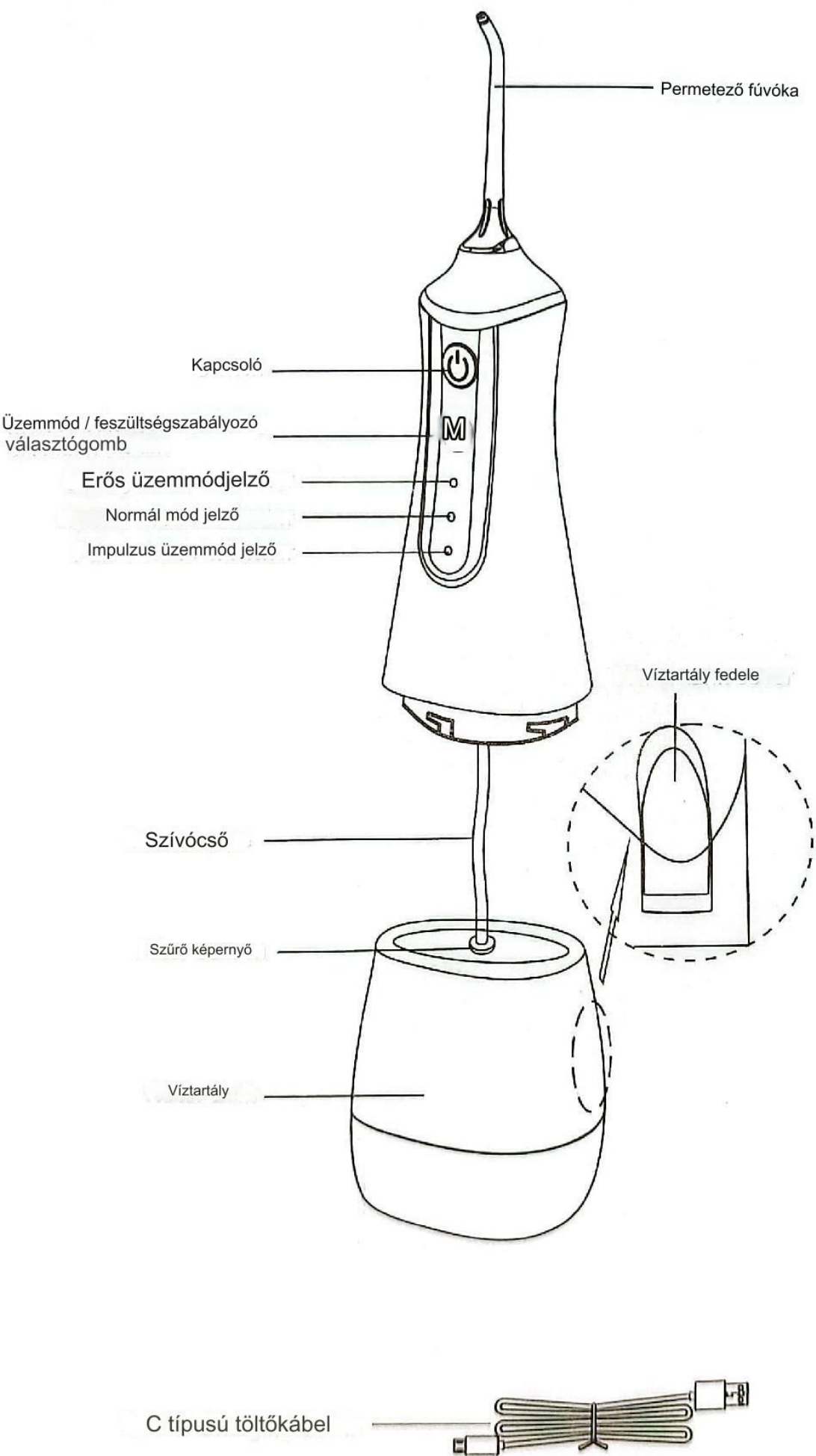

Használat előtt töltsse fel a terméket az alábbiak szerint:

1. Ellenőrizze, hogy a termék és a kezek szárazak-e, majd csatlakoztassa az USB-dugót az 5V-os adapterhez (az adaptert a felhasználó készíti elő), és dugja be a konnektorba. (1.ábra)

2. Vegye le a töltőfedelelet, dugja be az USB-kábel másik végét a lyukasztó töltőaljzatába, ügyeljen a töltődugóra és ellenőrizze, hogy a helyére van-e dugva.

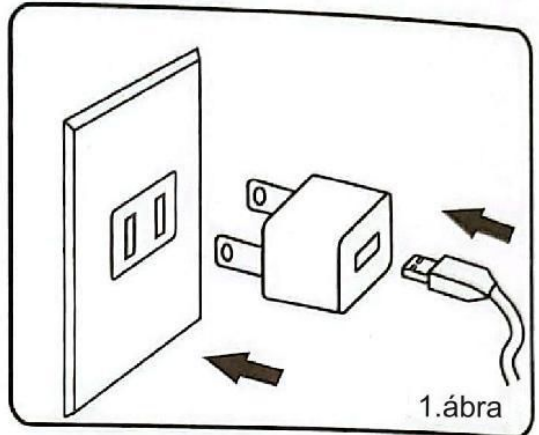


Meleg tippek:

Ha a jelzőfény használat közben vagy után villog,

Az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.


A teljes feltöltéshez 4-5 óra szükséges. Töltés közben a jelzőfény villogása jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

A jelzőfény abbahagyja a villogást, jelezve, hogy teljesen fel van töltve.

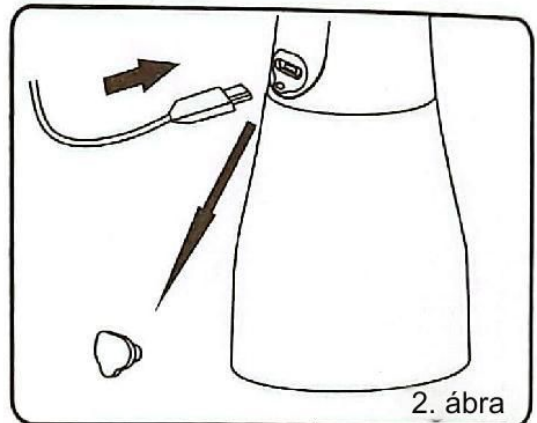


Használat közben kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze be a fúvókát a vízselyem tetején lévő lyukba, és forgassa el 90°-kal a rögzítéshez (3-1. ábra). Ha ki kell cserélni a fúvókát, először állítsa le, majd forgassa el a fúvókát 90°-kal, majd húzza ki a cseréhez. (3-2. ábra).

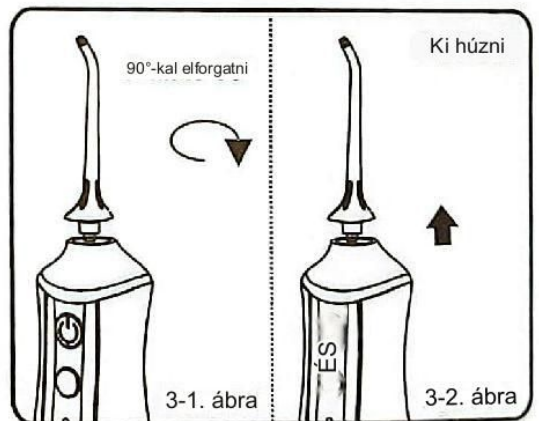

2. Töltsse fel vízzel a víztartályt. A víz feltöltésének két módja van, az alábbiak szerint:

a. Nyissa ki a víztartály fedelét, tartsa vízszintesen a fogóblítót, öntsön vizet a víztartályba, majd zárja le a víztartály fedelét. (4. ábra)

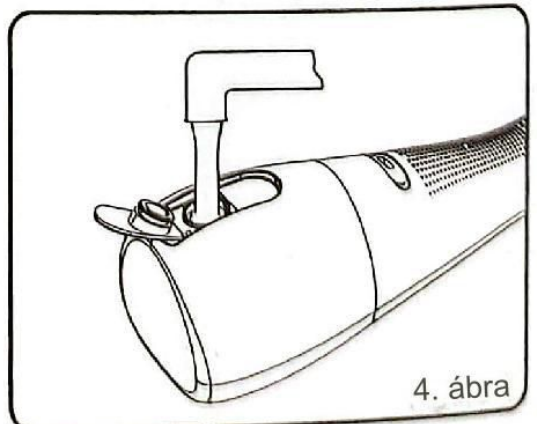

b. Forgassa el a víztartályt a kioldási irányba a víztartály eltávolításához, tartsa függőlegesen a víztartályt, nyomja felfelé a beszerelés során, majd forgassa a helyére a zár irányába a záráshoz. (5. ábra)

3. Válassza ki a kívánt módot a mód gomb megnyomásával. Használat közben a mód gomb megnyomásával is átválthat a kívánt üzemmódba. Ennek a terméknek három üzemmódja van: tisztítás, pulzálás és szőrfőzés.

A konkrét funkciók a

következők:

**Erős mód: Mélytisztítás, gyors tisztítás;**

**Normál üzemmód: Szabványos**

**víznyomás a napi tisztításhoz;**

**Impulzus üzemmód: Az íny masszírozása a vérkeringés elősegítése, az íny egészségének**





**javítása érdekében, alkalmas érzékeny fogakra, első alkalommal használók számára.**

Tippek:

A fogorvosi szakértők azt javasolják, hogy az első felhasználó 1 hétig használja a pulzus üzemmódot, majd alkalmazkodás után más módokat.

4. Használat előtt függőlegesen kell tartani a foglyukasztót, a fúvóka benyúlik az üregbe, igazítja a fogakat vagy az ínyt, a száj pedig kissé kinyílik, hogy a víz simán ki tudjon folyni. (6-1. és 2. ábra)

5. Nyomja meg a kapcsoló gombot a használathoz, Használat közben ügyeljen a következő pontokra: (7. ábra) a, A víz áramlási iránya merőleges a fogakra vagy az ínyre; b. Lassan mozogjon a fogak mentén, és sorrendben tisztítsa meg a fogakat;

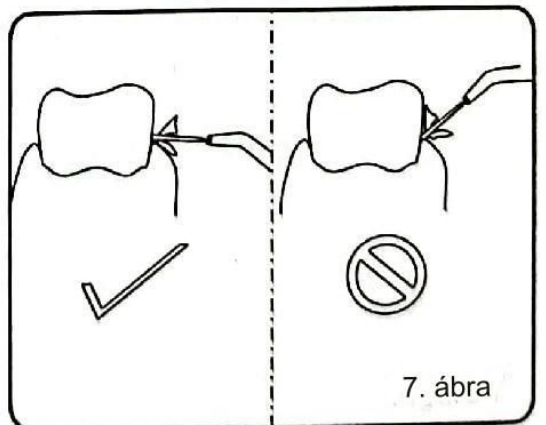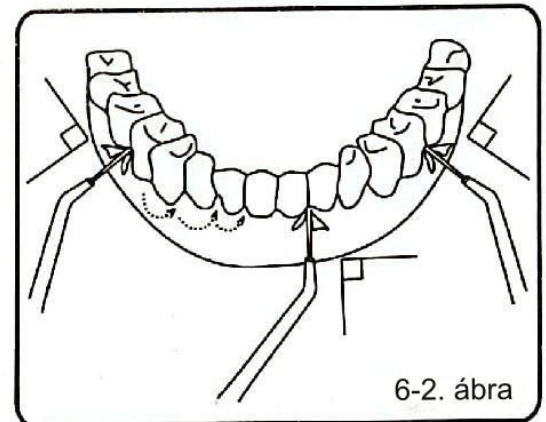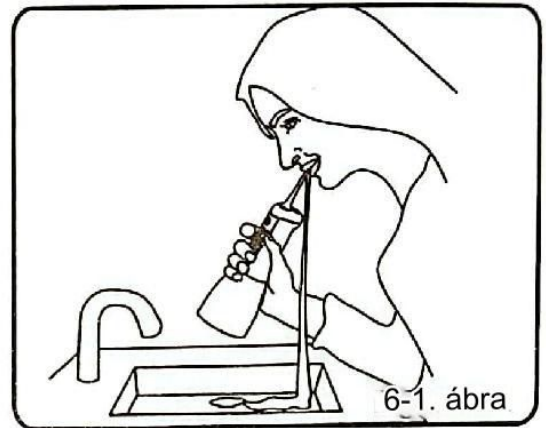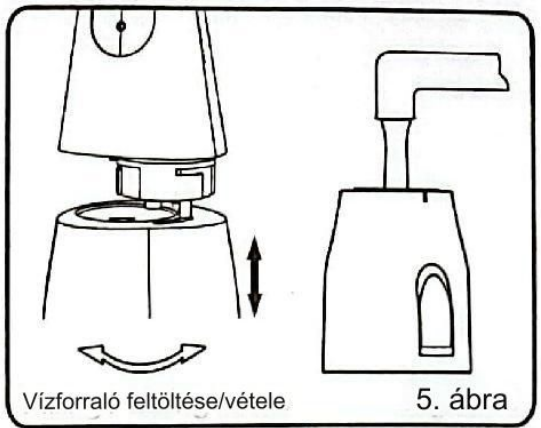

c. A fúvóka egy vonalban van az íny vonalával és merőleges az ínyre;

Tippek:

Ne permetezzen vizet közvetlenül a parodontális zsebre.

Használat után nyomja meg a kapcsoló gombot a kikapcsoláshoz. Ez a termék 2 perces időzítő funkcióval rendelkezik.

2 perc múlva automatikusan kikapcsol. Ha továbbra is használnia kell, nyomja meg a kapcsoló gombot.

Használat után kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa ki a víztartály fedelét, és öntse ki a vizet. (8. ábra)

2. Nyomja meg a kapcsoló gombot a

fogmosáshoz és a felgyülemlt víz automatikus leeresztéséhez. (9. ábra)

3. Nyomja meg a kapcsoló gombot

a lyukasztó leállításához, majd zárja le a víztartály fedelét.




4. Szárítsa meg a fogtisztítót egy ruhával. (10. ábra)

Tippek:

A baktériumok terjedésének

elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne legyen maradék víz a fogöblítőben. Ha

hosszabb ideig nem szeretné használni, kérjük, tisztítsa meg a terméket, és szárítás után tárolja.

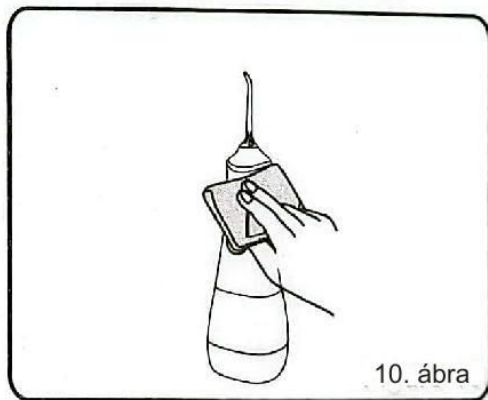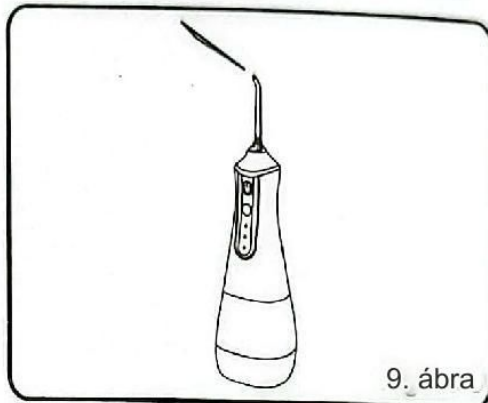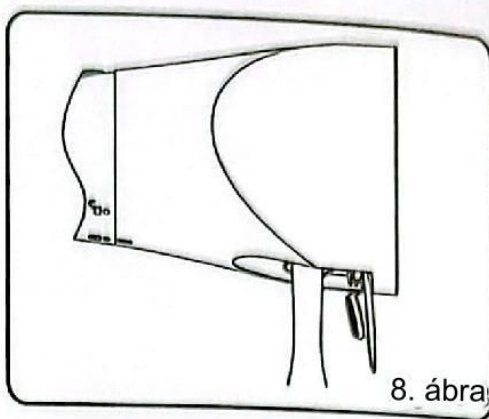

## Rutin karbantartás

A termék tisztításához használjon tiszta vizet vagy semleges tisztítószeret, ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a terméket. Ne mossa le 50°C feletti forró vízzel.

A test tisztítása:

- Tisztítsa meg a testet száraz vagy nedves ruhával.
- Tisztítás céljából ne merítse vízbe a testet.

Víztartály tisztítása:

- Száraz vagy nedves ruhával tisztítható, vagy eltávolítható és tiszta vízzel leöblíthető.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni, kérjük, tisztítsa meg a benne lévő vizet.

A fúvóka tisztítása:

- Száraz törülközővel vagy nedves ruhával tisztítható, vagy eltávolítható és tiszta vízzel öblíthető, majd törölje szárazra egy ronggyal.
- Ne hajlítsa, húzza vagy csavarja a fúvóka tömlőt.
- A fogászati szakértők azt javasolják, hogy a fúvókát 6 havonta cseréljék ki.

# Hibaelhárítás

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
Áj le a munkával	Új vásárlás vagy hosszú ideig tartó töltés hiánya az akkumulátor lemerüléséhez vezet	Kérjük, töltsen 3 óránál tovább
Alacsony víznyomás használat közben vagy nincs vízpermet	Valami eltömődött a fúvókában	Cserélje ki a fúvókát
	A szívó bemenet eltömődött	Tisztítsa meg a szívónyílást
	Egy ideje tétlenül áll	Húzza ki a fúvókát, hogy átöblítse a fúvókanyílást a fő egységen Amikor a tartály tele van vízzel, vízszintesen vegye fel és kapcsolja be
Töltés után csak rövid ideig működik	Az akkumulátor elérte hasznos élettartamának végét	Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
	Elégtelen töltési idő	Kérjük, töltsen 3 óránál tovább
A töltésjelző nem világít töltés közben	A tápcsatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva	Kérjük, csatlakoztassa megfelelően a tápegységet
	A termék töltőáramköre hibás	Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval

## Ártalmatlanítás

Ez a termék újratölthető elemeket használ. A termék élettartamának végén, mielőtt kidobná a terméket, feltétlenül vegye ki az akkumulátort, és a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra, vagy semmisítse meg. Ha kétségei vannak, forduljon a helyi hulladékgazdálkodási osztályhoz.